



# ATTP MOBILE USER GUIDE


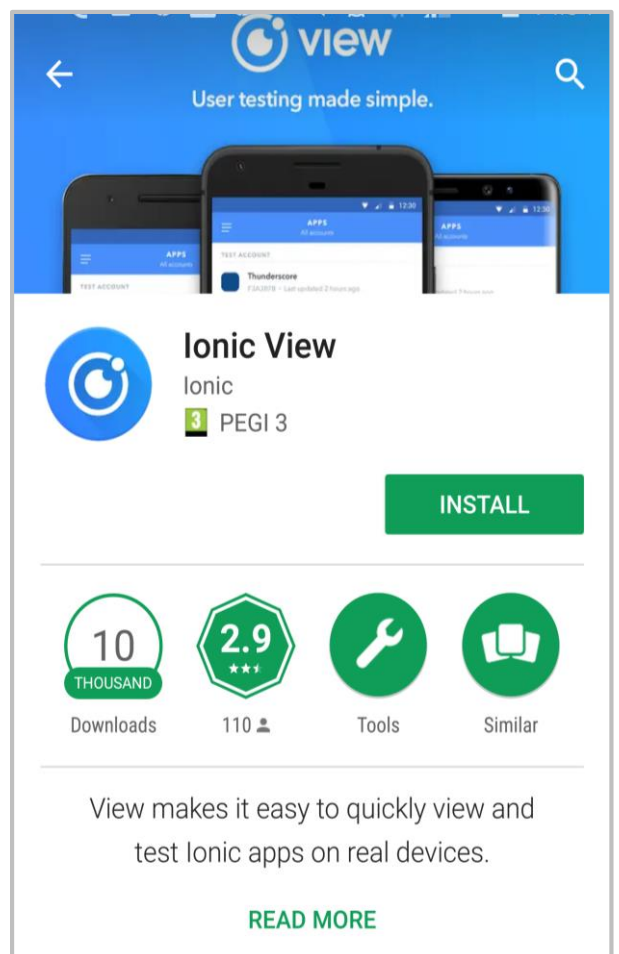


## INSTALLATION

- Install **Ionic View** from **App Store** or **Google Play**  
(not Legacy Ionic View, it is old version)



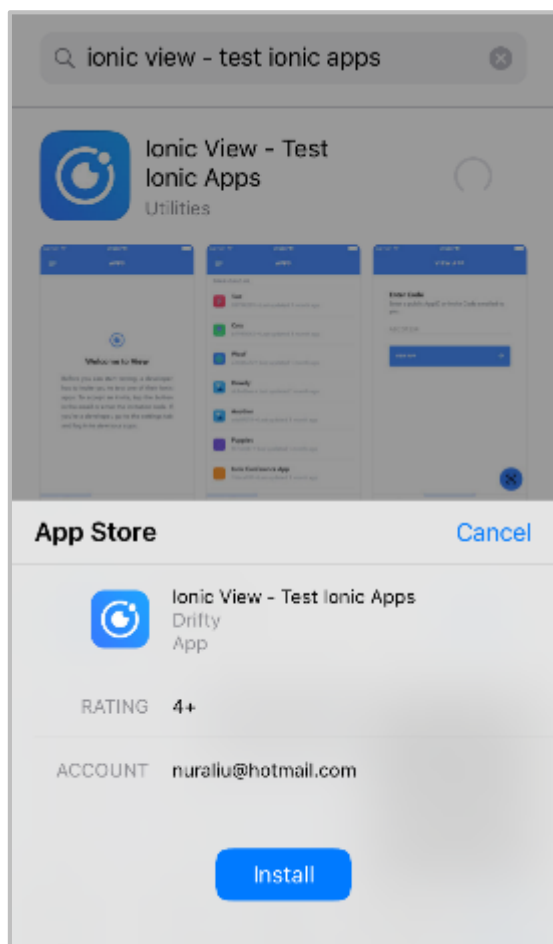


- Open **View App** tab
- Enter AppID: **957c3074**
- Click **View App**
- **ATTPMobile** app will start

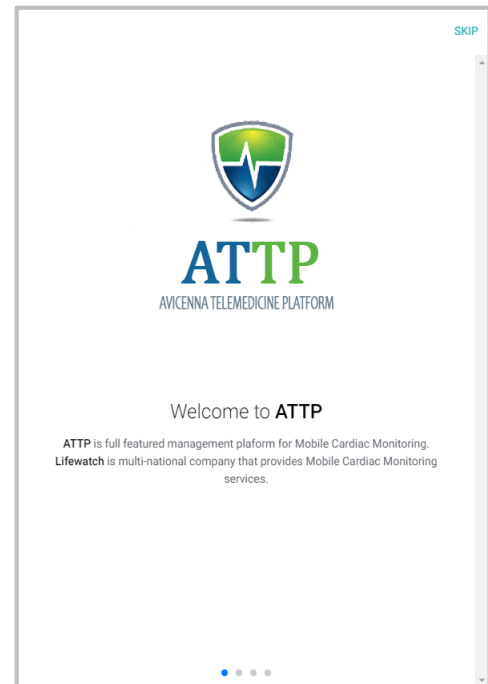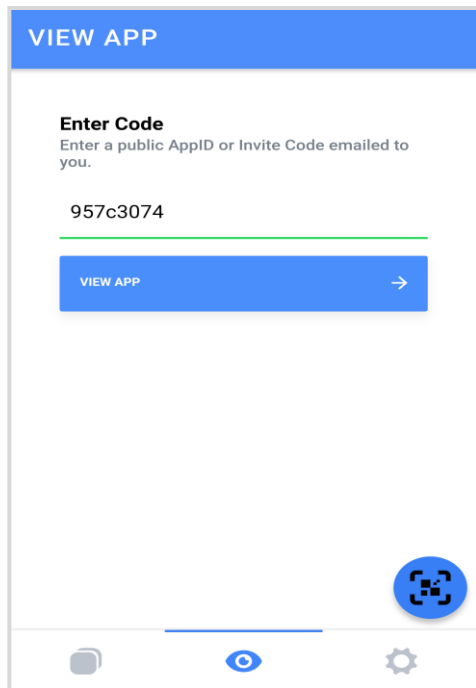

## APPLICATION USAGE

- Open **Ionic View**
- Click **ATTPMobile** from Applications list
- **ATTPMobile** will start
- Skip introduction page
- Enter your **Username & Password**  
(only accounts having **Sistem Yöneticisi** role are allowed for now)
- Select the environment (PROD)
- Click **Login**
- If authorized, you will see the list of enrollments

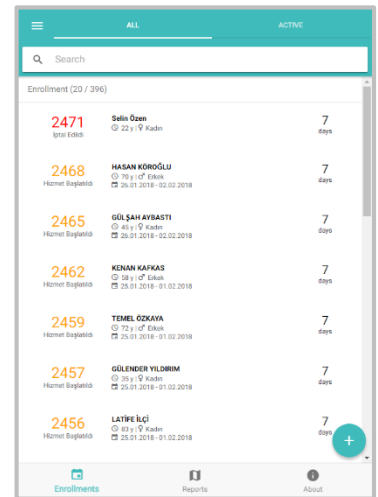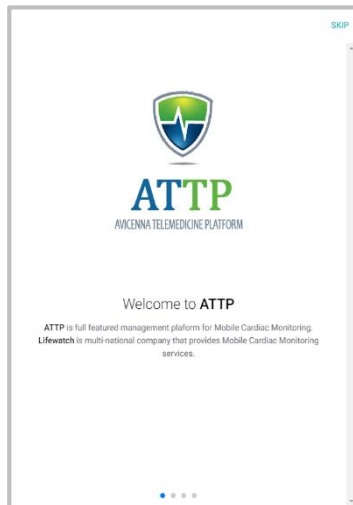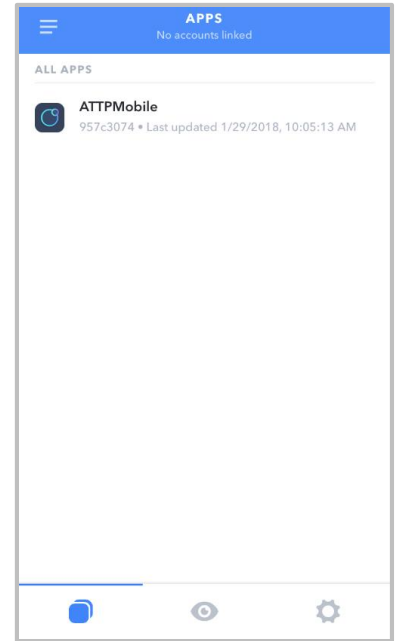

## MAJOR SCREENS

- Intro Page
- Login Page
- Enrollments List
- Reports List
- Profile Page
- About Page



## MAJOR FUNCTIONALITIES

- Multi Deployment Access
- List/Filter Enrollments
- List/Filter Reports
- Report Download
- Call Patient
- Call Doctor
- Filter by Status (Active/All)
- Filter by Keyword
- Filter by Report Type



## MAJOR FEATURES

- Material UI Design
- Infinite Scrolling (on-demand)
- Conditional Formatting
- Side Menu Access
- Deployed on both App Store & Google Play



# SCREENSHOTS

SKIP



**ATTP**  
AVICENNA TELEMEDICINE PLATFORM

## Welcome to **ATTP**

**ATTP** is full featured management platform for Mobile Cardiac Monitoring.  
**Lifewatch** is multi-national company that provides Mobile Cardiac Monitoring services.



SKIP



## Start using ATTP

You can start using ATTP just by reaching Lifewatch in Turkey.  
Then you will have an account





SKIP



## Start getting ECG Reports

After getting your **doctor account** you will be able to create new **enrollments** for your patient

And then you will start getting live ECG reports from you patients.





Ready to use?

If you already have your **doctor account**, then you can start.

**CONTINUE →**





## Login



**ATTP**  
AVICENNA TELEMEDICINE PLATFORM

Username

Password





Server

LWTR PROD

LOGIN

v0.9

<http://lwtip.lifewatch.com.tr/ATTPBackEnd/>

ALL			ACTIVE
 Search			
Enrollment (20 / 396)			
2471 İptal Edildi	<b>Selin Özen</b> ⌚ 22 y   ♀ Kadın	7 days	
2468 Hizmet Başlatıldı	<b>HASAN KÖROĞLU</b> ⌚ 70 y   ♂ Erkek 📅 26.01.2018 - 02.02.2018	7 days	
2465 Hizmet Başlatıldı	<b>GÜLŞAH AYBASTI</b> ⌚ 45 y   ♀ Kadın 📅 26.01.2018 - 02.02.2018	7 days	
2462 Hizmet Başlatıldı	<b>KENAN KAFKAS</b> ⌚ 58 y   ♂ Erkek 📅 25.01.2018 - 01.02.2018	7 days	
2459 Hizmet Başlatıldı	<b>TEMEL ÖZKAYA</b> ⌚ 72 y   ♂ Erkek 📅 25.01.2018 - 01.02.2018	7 days	
2457 Hizmet Başlatıldı	<b>GÜLENDER YILDIRIM</b> ⌚ 35 y   ♀ Kadın 📅 25.01.2018 - 01.02.2018	7 days	
2456 Hizmet Başlatıldı	<b>LATİFE İLÇİ</b> ⌚ 83 y   ♀ Kadın 📅 25.01.2018 - 01.02.2018	7 days	
			+
			
Enrollments			
			
Reports			
			
About			



## 2468: HASAN KÖROĞLU

### Enrollment Details



Enrollment No

2468



Status

Hizmet Başlatıldı



Duration

7 days



Start Date

26.01.2018



End Date

02.02.2018



Clinic Name

EVALUATION HASTANESİ

### Patient Details



Patient Citizen No

23509624720



Patient Name

HASAN KÖROĞLU



Gender

Erkek



Age

70 y

### MDN Details



Tachycardia

200 mins



Bradycardia

30 mins

← 2468: HASAN KÖROĞLU



Patient Name

HASAN KÖROĞLU

Patient Details



Gender

ERKEK



Age

70 y

MDN Details



Tachycardia

200 mins



Bradycardia

30 mins



Pause

3 secs

Payment Details



Payer

DOCTOR



Total Amount

0 TL



Payed Amount

0 TL



Balance

0 TL




CALL PATIENT (MOBILE)  
00905078229383



CALL PATIENT (HOME)  
00902323674246



SEND EMAIL TO PATIENT  
SEDATKOROGLU35@GMAIL.COM

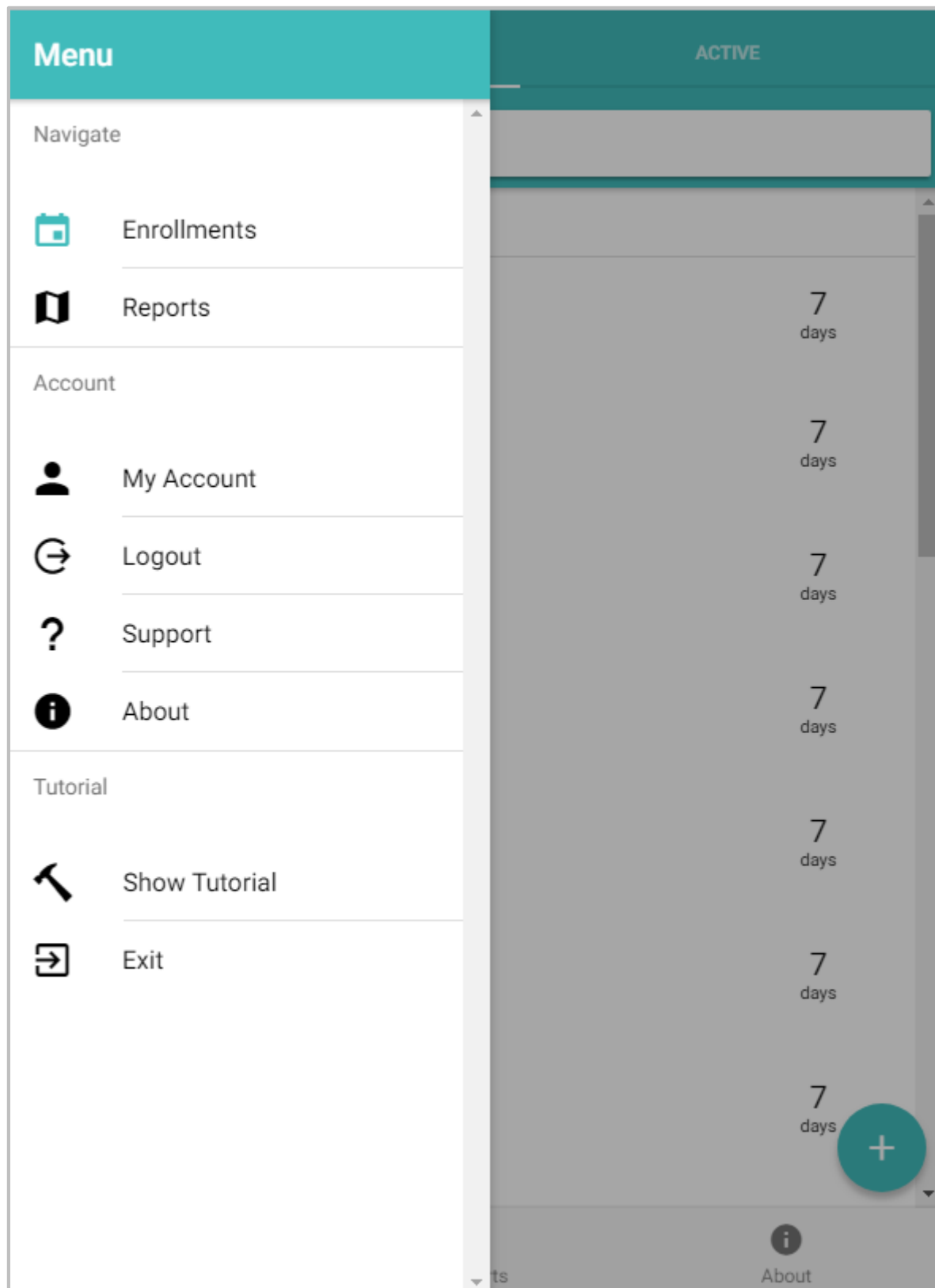

EOS			EVENT
Search			
Reports (20 / 322)			
12309	OKTAY ZORLU	Enrollment	2428
Aksiyon Alındı	29.01.2018 Manuel Gönderildi		
12146	MEDİHA SÖNMEZ	Enrollment	2426
Aksiyon Alındı	26.01.2018 Manuel Gönderildi		
12145	AYŞE SAKMAR	Enrollment	2434
Yeni	26.01.2018 Otomatik Yoksayıldı		
12144	EROL KARADAYI	Enrollment	2427
Aksiyon Alındı	26.01.2018 Manuel Gönderildi		
12100	ARİF BAŞ	Enrollment	2416
Yeni	26.01.2018 Otomatik Gönderildi		
12052	İSMAİL YILDIZ	Enrollment	2424
Yeni	25.01.2018 Otomatik Gönderildi		
12051	REFİK MERCAN	Enrollment	2439
Yeni	25.01.2018 Otomatik Gönderildi		
		+	
Enrollments		Reports	
		About	



## ← 12309: OKTAY ZORLU

### Report Details

🔑	Report No	12309
➤	Report Type	Hizmet Sonu Raporu
📌	Status	Aksiyon Alındı
📅	Report Date	29.01.2018 09:17

### Enrollment Details

🔑	Enrollment No	2428
👤	Patient	OKTAY ZORLU

### Delivery Details

📌	Delivery Status	Manuel Gönderildi
📄	Manuel Gönderim .CallLogID: 83196ced-617d-45e1-8e2b-b52ec7e9a120, Konu: Mobil Kardiyak Telemetry İzlem Hizmet Sonu Raporu	

### Metadata

💬	Comments	null
🚴	Activities	null
📄	Symptoms	null

## ← 12309: OKTAY ZORLU

### Report Details



Status

Aksiyon Alındı



Report Date

29.01.2018 09:17

### Enrollment Details



Enrollment No

2428



Patient

OKTAY ZORLU

### Delivery Details



Delivery Status

Manuel Gönderildi



Manuel Gönderim .CallLogID: 83196ced-617d-45e1-8e2b-b52ec7e9a120, Konu: Mobil Kardiyak Telemetry İzlem Hizmet Sonu Raporu

### Metadata



Comments

null



Activities

null



Symptoms

null

SHOW REPORT



## My Account



tursoft

[Update Picture](#)

---

[Change Password](#)

---

[Support](#)

---

[Logout](#)



## Support



**ATTP**  
AVICENNA TELEMEDICINE PLATFORM

Enter your support message below

|

//

**SUBMIT**



About



**ATTP**  
AVICENNA TELEMEDICINE PLATFORM

## ATTP Mobile v0.9

ATTP Mobile is a full featured platform for Mobile Cardiac Management.



ERC Group, Engineering,  
Consultancy and R&D Services

[OPEN WEB PORTAL](#)



Enrollments



Reports



About